



АНАЛИЗАТОР МУКИ (ФАРИНОГРАФ) Y02



Преимущества:

- Аппарат прост в эксплуатации
- Полученные данные сохраняются в собственном компьютере
- Интегрированный компьютер делает возможным подключение через Интранет
- Возможность обновления программного обеспечения через удаленный доступ
- Устройство защиты, находящееся на крышке миксера, не позволяет прибору работать без крышки
- Понятное пользователю программное обеспечение на нескольких языках
- Определение реологических свойств муки



АНАЛИЗАТОР МУКИ (ФАРИНОГРАФ) Y02

Анализатор муки - это аппарат, позволяющий получать необходимые данные о хлебопекарных свойствах муки, а также о реологических свойствах в процессе замеса теста. Посредством данного аппарата определяется сопротивление лопаткам тестомесителя при замесе. Вся полученная информация обрабатывается встроенным промышленным ПК с собственным программным обеспечением, записывается и выводится на имеющийся монитор. Возможно сохранение графиков в формате PDF.



Технические характеристики :



Размеры : 360 мм x 650 мм x 490 мм

Электропитание : 220 V 50 - 60 Hz

Вес нетто : 115 кг

Миксер : 300 г.—стандартный , 50 г.— опция

Скорость миксера : 63 мин⁻¹

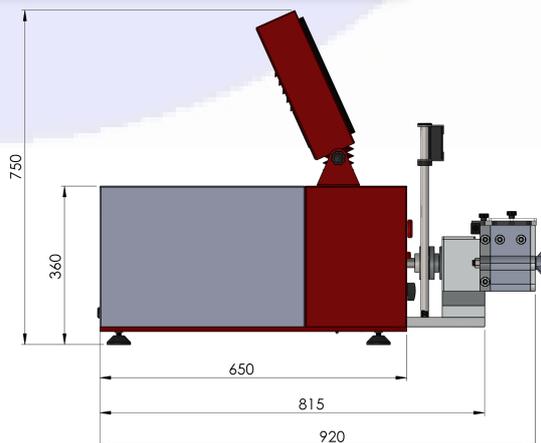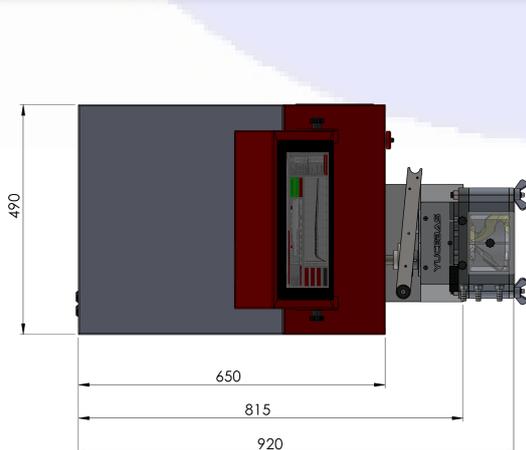



YUCEBAS MACHINE ANALYTICAL EQUIPMENT INDUSTRY

Показатели, определяемые анализатором муки:

- Водопоглотительная способность (%).
- Время тестообразования (мин.).
- Стабильность теста (мин.).
- Уровень смягчения на 10й, 12й и 20й минутах (B.U.).
- Коэффициент качества муки.

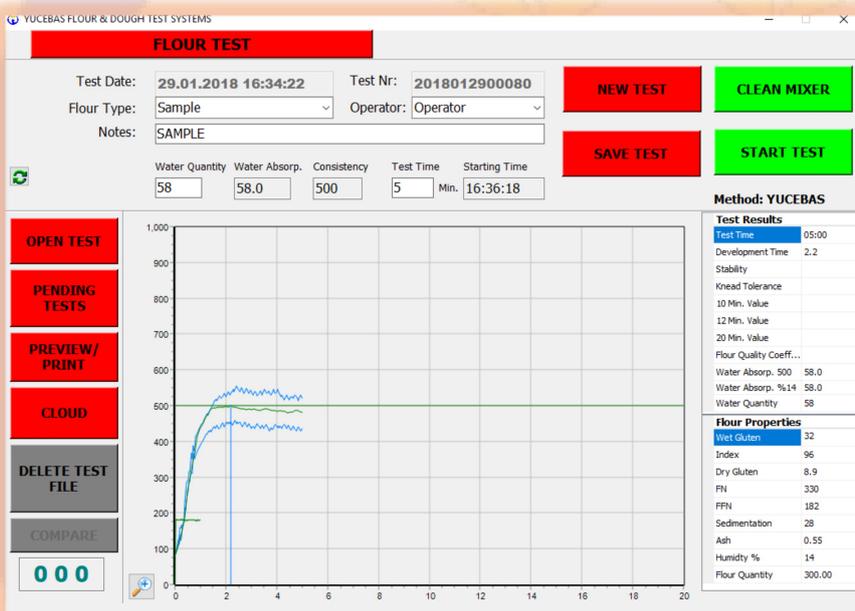


График 5-ти минутного анализа

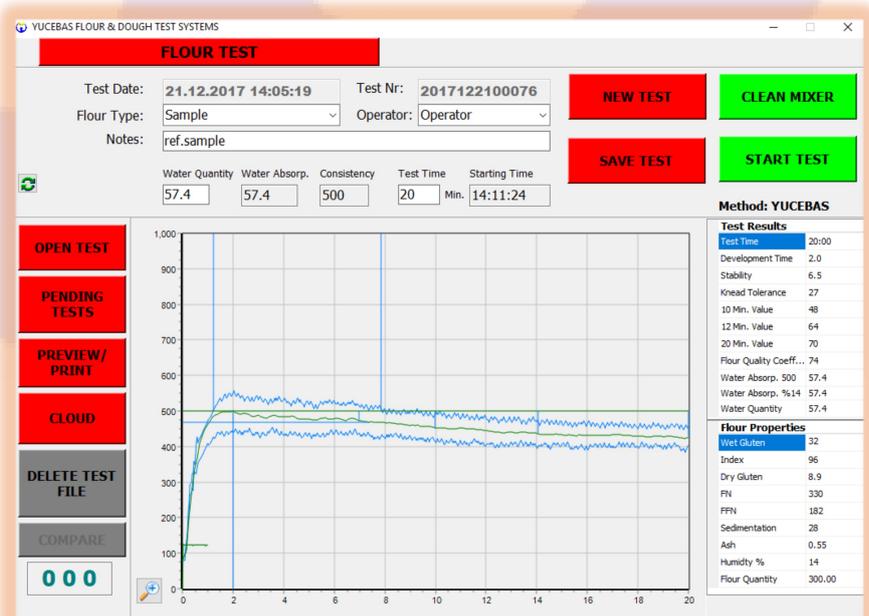


График 20-ти минутного анализа



YUCEBAS MACHINE ANALYTICAL EQUIPMENT INDUSTRY

Рекомендуемые приборы для устройства для



АНАЛИЗАТОР ТЕСТА (ЭКСТЕНСОГРАФ) Y03



ТАНК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ - Y14.1



ЛАБОРАТОРНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОТРУБЕЙ - Y19



МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПОМОЛА УВЛАЖНЕННОЙ ПШЕНИЦЫ Y18



МИКСЕР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ПШЕНИЦЫ - Y21

YUCEBAS MACHINE ANALYTICAL EQUIPMENTS INDUSTRY

Factory :Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6

Helvacı / Aliağa / İZMİR / TURKEY

Tel : + 90 232 627 90 07 - Fax : + 90 232 627 90 08

www.yucebasmakine.com.tr

info@yucebasmakine.com.tr

