



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ YUCEBAS MACHINE

## ГАСТОГРАФ - Y55

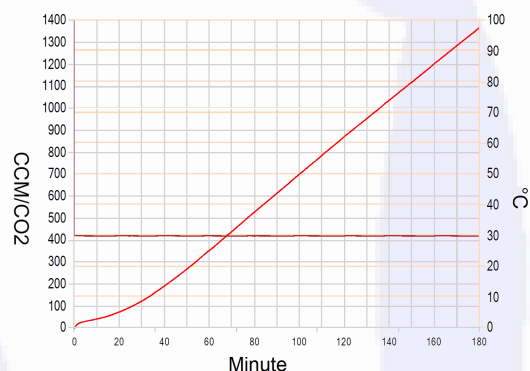


ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ YUCEBAS MACHINE

**ГАСТОГРАФ—Y55**

Прибор измеряет выделение газа  $\text{CO}_2$  вследствие активности дрожжей в образцах теста, а также измеряет активность самих дрожжей. Исследуется активность как свежих, так и сухих (растворимых) дрожжей. Возможность одновременного анализа нескольких образцов. Температура в расстоечной камере контролируется. Расстоечные камеры снабжены резиновыми уплотнителями и хромированными дверцами. Измеряется объем  $\text{CO}_2$ , выделяемого в конкретный период времени. Прибор позволяет выполнять анализы в течение 3 часов без вмешательства лаборанта. Гастограф полезен производителям дрожжей, мельницам, пекарням, лабораториям, исследовательским институтам, университетам и проч. Результаты тестов отображаются в виде графика и отдельной колонки  $\text{CO}_2$ , их можно распечатать сразу, преобразовать в формат pdf или экспортировать в формат excel.

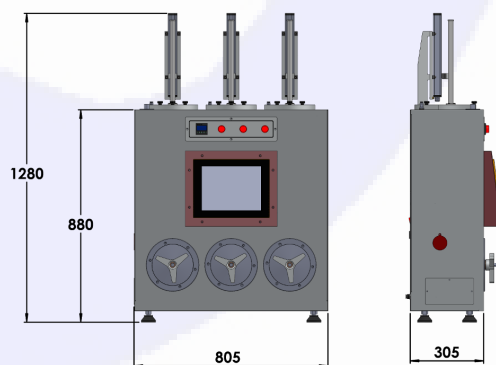
- Определение качества дрожжей
- Сохранение данных и результатов в собственном компьютере
- Отображение графика анализа в режиме реального времени
- Контроль за температурой во время анализа
- Высокая точность (Погрешность:  $0.5 \text{ ccm}/\text{CO}_2$ )
- Прост и надёжен в использовании
- Легкая калибровка
- Интегрированный компьютер делает возможным подключение через intranet
- Возможность обновления программного обеспечения через удалённый доступ
- многоязычное и удобное для пользователя программное обеспечение

**Технические характеристики:**

**Размеры (В х Д х Ш) :** 880 + 400 mm x 305 mm x 805 mm

**Электропитание** : 220 В, 50 - 60 Гц

**Вес нетто** : 70 кг

**ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ YUCEBAS MACHINE**

Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6

Helvacı / Aliğa / İZMİR / TURKEY

Тел.: + 90 232 627 90 07 - Факс : + 90 232 627 90 08

[www.yucebasmakine.com.tr](http://www.yucebasmakine.com.tr)

[info@yucebasmakine.com.tr](mailto:info@yucebasmakine.com.tr)